

Betriebsanleitung für Babywaage

Baby scale

Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche Nutzung geeignet.



belko[®]

Einleitung

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Belko® entschieden haben. Um die Langlebigkeit des Produkts zu gewährleisten beachten Sie bitte unbedingt, die umseitig folgende Aufbau bzw. Bedienungsanleitung.

Wir empfehlen diese Anleitung zum späteren Nachschlagen aufzuheben. Sie haben eine Frage zu dem Artikel? Es ist leider ein Problem aufgetreten? Für den technischen Support und Serviceanfragen können Sie sich vertrauensvoll an unsere geschulten Mitarbeiter unter info@belko-germany.de wenden.

Allgemeines

ACHTUNG! Beachten Sie die Sicherheitshinweise und Aufbauanweisungen, um das Risiko von Verletzungen oder Beschädigungen am Produkt zu vermeiden.

Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche Nutzung geeignet!

Wichtig: Lesen Sie die Anleitung vollständig und gründlich durch. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie eines Tages das Produkt weitergeben, achten Sie darauf, auch diese Anleitung weiterzugeben.

Halten Sie kleine Teile außerhalb der Reichweite von Kindern. Achten Sie auch insbesondere beim Auspacken darauf Plastiktüten und anderes Verpackungsmaterial von Kindern fernzuhalten) Erstickungsgefahr!

Prüfen Sie alle Elemente und Teile auf Schäden. Trotz sorgfältiger Kontrollen kann es passieren, dass auch die beste Ware auf dem Transportweg Schaden nimmt. Defekte Teile können Gefahren und Gesundheitsschäden nach sich ziehen.

Nehmen Sie niemals Änderungen am Produkt vor! Durch Änderungen erlischt die Garantie und das Produkt kann unsicher bzw. schlimmstenfalls sogar gefährlich werden.

Verwenden Sie zur Reinigung einen Schwamm und warmes Seifenwasser. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger oder Waschmittel, z.B. Bleichmittel können das Produkt beschädigen.

Technische Daten

- Maximale Traglast: 20 kg
- Maßeinheiten: kg / lb /st
- Anzeige numerischer Werte: 10g
- Batterie 2x AAA-Batterie
- Arbeitstemperatur 0°C - 40°C
- Displaydarstellung LCD-Anzeige, 3 Einheiten

Tasten-Funktion

- ON/OFF/TARA-Taste: Einschalten, Ausschalten, Tara
- MAßEINHEITEN-Taste (UNIT):
 - Einstellen der gewünschten Maßeinheit kg oder lb/st.
 - Haltefunktion, um das Gewicht zu fixieren.


Einleitung

Sicherheitshinweise

- 1) Sie müssen die Waage vor Stößen, Feuchtigkeit, Staub, Chemikalien, starken Temperaturschwankungen und zu nahen Wärmequellen (Öfen, Heizungskörper) schützen.
- 2) Stellen Sie keine Gegenstände auf die Waage, wenn sie nicht benutzt wird.
- 3) Die Genauigkeit der Waage kann durch starke elektromagnetische Felder (z.B. Induktionskochfeld, Mobiltelefone) beeinträchtigt werden.
- 4) Niemals überbelasten! Die Belastbarkeit der Waage beträgt max. 20 kg (44 lb/3.15 st). Dies schließt das Gewicht vor Nutzung der TARA-Funktion mit ein.
- 5) Eventuell vorhandene Transportsicherung entfernen.
- 6) **ACHTUNG!** Babys, die sich auf der Waage befinden, sind unter ständiger Beobachtung zu halten, um ein Herausfallen zu vermeiden.



Übersicht

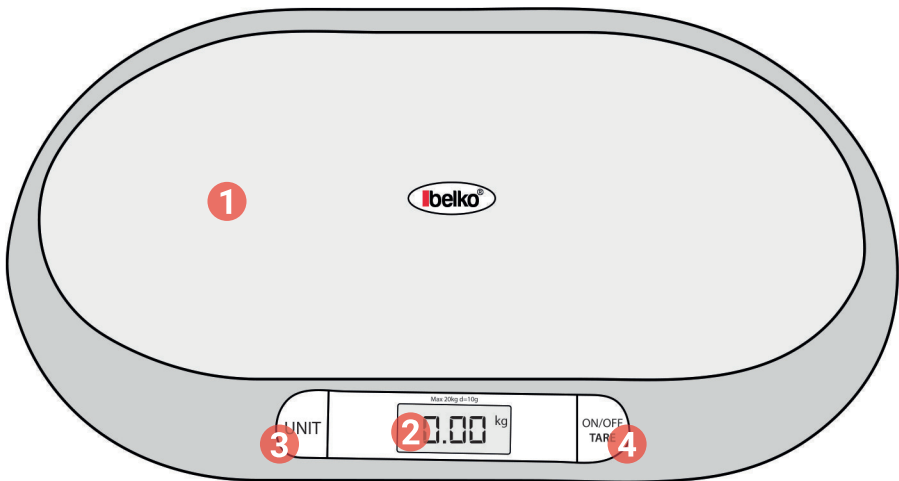

- 1) Wiegeschale
- 2) LCD-Lisplay
- 3) Messeinheit bestimmen
- 4) AN-AUS / Tara einstellen

Bedienung

Bedienung

Stellen Sie die Waage auf eine saubere, ebene Oberfläche. Es besteht die Gefahr, dass das Baby von der Waage fallen könnte, wenn Sie die Waage auf einen weichen oder unebenen Untergrund stellen. Eine feste Standfläche ist Grundvoraussetzung für eine korrekte Messung.

Batterie

Das Gerät benötigt zwei AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten).

Setzen Sie diese bitte vor Gebrauch ein. Nehmen Sie die Waage aus der Verpackung und öffnen Sie die Batterieabdeckung auf der Unterseite der Waage. Setzen Sie die Batterien gemäß Polung ein. Schließen Sie anschließend die Batterieabdeckung.

Der Wiegevorgang

- 1) Zum Einschalten drücken Sie die „ON/OFF/ TARA“-Taste. Die Anzeige „0.00“ erscheint nach 2 Sekunden auf dem Display.
- 2) Drücken Sie die MAßEINFLEITEN-Taste (UNIT), um die Maßeinheit zu ändern (kg, lb, st).
- 3) Legen Sie Ihr Baby auf die Waage. Gehen Sie dabei sehr vorsichtig vor, lassen das Baby nicht fallen und achten Sie auf den Kopf des Babys.
- 4) Das Display wird das Gewicht des Babys anzeigen. **Wichtig! Fassen Sie das Baby dabei nicht an, um die Gewichtsmessung nicht zu beeinflussen.**
- 5) Drücken Sie die „ON/OFF/TARA“-Taste, um die Anzeige auf „0“ zu setzen. Leeren Sie den Behälter. Setzen Sie dann Ihr Baby in den Behälter - das Gewicht wird auf dem Display angezeigt.
- 6) Drücken Sie die „ON/OFF/TARA“-Taste, um die Waage auszuschalten.

TIPP: Möchten Sie das Baby nicht direkt auf die Wiegefläche legen, sondern beispielsweise auf ein Handtuch, müssen Sie das Handtuch VOR dem Einschalten auf die Waage legen.

Wiegt das Handtuch und andere Gewichte, die Sie beim Wiegevorgang wieder abziehen möchten, mehr als 50g, benutzen Sie die TARA-Funktion.

Fehleranzeigen

- > Sobald die Waage überladen wird, zeigt das Display die Meldung „O-LD“ an.
- > Die Meldung „LO“ bedeutet, dass die Batterien ausgewechselt werden müssen.

Reinigung

Sollte die Oberfläche der Waage schmutzig sein, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch ohne Verwendung chemischer Reinigungsmittel. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Waage eindringt. Spülen Sie sie auch niemals unter fließendem Wasser ab.

Entsorgung

Entsorgung

Am Ende der langen Lebensdauer Ihres Artikels führen Sie bitte die wertvollen Rohstoffe einer fachgerechten Entsorgung zu, so dass ein ordnungsgemäßes Recycling stattfinden kann. Sollten Sie sich nicht sicher sein, wie Sie am besten Vorgehen, helfen die örtlichen Entsorgungsbetriebe oder Wertstoffhöfe gerne weiter.

Korrekte Entsorgung dieses Produktes



Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden.

Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.

Hinweise nach dem Batteriegesetz



Als Endnutzer sind Sie zur Rückgabe gebrauchter Batterien gesetzlich verpflichtet. Sie können Batterien nach Gebrauch an uns oder in den dafür vorgesehenen Rücknahmestellen (z.B. in kommunalen Sammelstellen oder im Handel) unentgeltlich zurückgeben.

Sie können die Batterien auch an uns zurücksenden. Wir erstatten Ihnen das Briefporto für die Rücksendung der Altbatterie.

Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:

= Batterie darf nicht in den Hausmüll gegeben werden.

Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei.

Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium.

Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

Über die Babywaage

Für technischen Support, Serviceanfragen oder Bestellungen wenden Sie sich vertrauensvoll an unsere geschulten Mitarbeiter unter info@belko-germany.de

Weitere tolle Produkte

Viele weitere Produkte finden Sie in unserem Onlineshop.
Diesen finden Sie unter der Internetadresse
www.panorama24.eu



Copyright © 2019 Panorama24 GmbH.
Hergestellt für Panorama24 GmbH, Chromstr. 4, 30916 Isernhagen
Belko ist eine Marke der Panorama24 GmbH